

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関して下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

超音波／イオン美顔器

SH-2662 取扱説明書

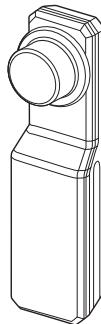

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX1307A

●もくじ

| | |
|-------------|-------|
| 安全上のご注意 | 1~4 |
| 各部の名称とはたらき | 5 |
| 電池の入れかた | 6 |
| 初めてご使用になるとき | 7 |
| ご使用前に | 8 |
| イオンクレンジング | 9・10 |
| 超音波 | 11・12 |
| 基本の使いかた・手順 | 13・14 |
| お手入れと保管のしかた | 15 |
| こんなときは | 16 |
| アフターサービス | 17 |
| 仕様 | |

保証書付

保証書はこの取扱説明書の
裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

() は、してはいけない「禁止」の内容です。

△強制 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

電池について

△警告

〔アルカリ乾電池について〕

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液がもれて目に入ったり、発熱、破裂の原因になります。
- (2) 万一アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

△注意

下記のことを守ってください。電池の使いかたを間違えますと、液もれや破裂などの恐れや、機器の故障やけがの原因になります。

- (1) \oplus プラス \ominus マイナスを間違えないように正しく入れてください。
- (2) 電池を交換するときは、全部の電池を新しい指定の電池と交換してください。
- (3) 電池に直接ハンダ付けをしないでください。
- (4) 長い間(2週間以上)お使いにならない場合は、電池をはずしておいてください。液もれ故障の原因になります。
 - 指定された電池を使用してください。
 - 使い切った電池は速やかに取り出してください。
 - 電池を交換するときは電池と端子の汚れを落としてから入れてください。

本体について

△危険



下記のような医療用電子機器をお使いのかたは、使用しないでください。

- (1) ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- (2) 心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器の誤動作をまぬく恐れがあります。

△警告



次のようなかたは、使用を避けてください。

- (1) 心臓に障害のあるかた
- (2) 悪性腫瘍のあるかた
- (3) 急性(疼痛性)疾患のかた
- (4) 有熱性疾患のかた
- (5) 血圧異常のかた
- (6) 感染症疾患のあるかた
- (7) 結核性疾患のかた
- (8) 顔面神経痛のかた
- (9) 妊娠中のかた
- (10) 生理中のかた
- (11) アトピー性皮膚炎のかた
- (12) アレルギー体质のかた
- (13) 特に肌が敏感なかた
- (14) 血友病疾患のかた
- (15) ステロイド系ホルモン剤を長期使用しているかた
- (16) 肝機能障害で毛細血管拡張を起こしているかた
- (17) 飲酒している場合や薬を服用中のかた
- (18) 疲労の激しいかた、健康が特にすぐれないかた
- (19) 肌にケガや傷がある場合や日焼け直後

事故やトラブルの恐れがあります。



下記の部位には使用しないでください。

- (1) 整形手術をした部位
- (2) 目や耳のまわり
- (3) 傷口
- (4) 顔面黒皮症
- (5) 口の中等粘膜の部位
- (6) ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- (7) 感覚、知覚障害を起こしている部位
- (8) 皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
- (9) カユミやホテリ、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- (10) 化粧品などで皮膚炎を起こしている部位

事故や肌・身体のトラブルの恐れがあります。

警 告



次のことを守ってご使用ください。

- 使い始めは、使用時間を短めにして、肌の様子を見ながら使用してください。
- 使用はイオンクレンジングモードで1日1回、超音波モードで週2~3とし、1回の使用は5分以内にしてください。
5分以上の連続使用や、1日に何度もくり返し使用すると肌に負担がかかり、肌トラブルを起こす原因になります。
- ヘッドは肌の同一部位に長くとどめず10秒以内で移動させてください。
- イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズははずしてから使用してください。
- ひどい肌荒れ、皮膚表面に凹凸がある場合、うぶ毛などによって、まれに刺激を強く感じことがあります。その際は、その部位への使用は控えてください。
守らないと事故やトラブルの恐れがあります。



ご使用中に気分が悪くなったり、肌に異常や痛みを感じた場合は、すぐに使用を中止して専門の医師にご相談ください。



事故や肌・身体のトラブルの
恐れがあります。



顔(美容目的)以外には行わないでください。

守らないと事故やトラブルの恐れがあります。



絶対に分解したり修理・改造はしないでください。

発火・感電・けがや故障の原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

警 告



幼児や子供の手の届かない場所に保管し、幼児や子供には使用しないでください。

事故や故障の原因になります。
取りはずしのできる部品や付属品など誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。



浴室など水のかかる所や湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。

故障やショートの原因になります。



落としたり、強い衝撃を与えないでください。

けがや故障の原因になります。



水につけたりしないでください。

故障やショートの原因になります。



お手入れの際は必ず電池を抜いてください。

誤ってスイッチが入ると刺激を受けたり、誤動作、故障の原因になります。

注 意



肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しないでください。

肌のトラブルや痛みの原因になります。



脱毛、剃毛処理した当日は同部位へ使用しないでください。

腫れたり、赤みが出る恐れがあります。



お手入れするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。

ひび割れ、感電、引火の恐れがあります。




高温・直射日光のある場所に放置しないでください。


故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

正面

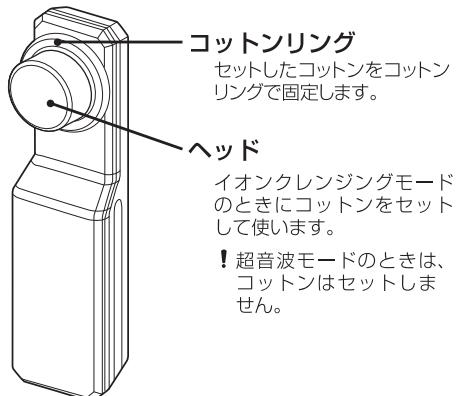

背面

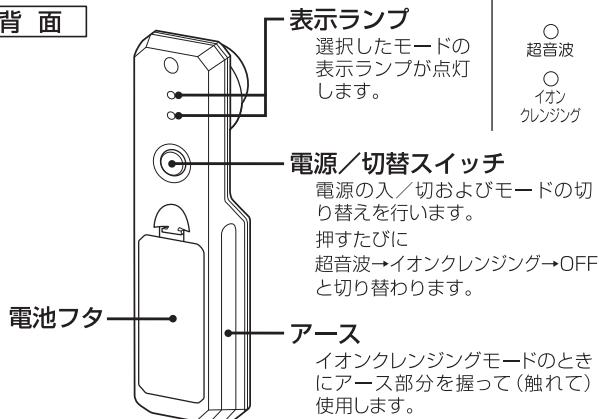

〈オートオフタイマーについて〉

電源を「入」にしてから約5分経過後に自動で電源が「切」になります。

電池の入れかた


電池は付属しておりません。

市販の単4形アルカリ乾電池(LR03)2本をお買い求めください。

△注意


- 単4形アルカリ乾電池(LR03)以外は使用しないでください。
他の電池では、パワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
- 電源／切替スイッチを押しても表示ランプが点灯しない、または電源「入」から5分経過しないうちに表示ランプが点滅したり消灯したりする場合は、電池の寿命です。新しい電池と交換してください。

1. 電池フタをはずします。

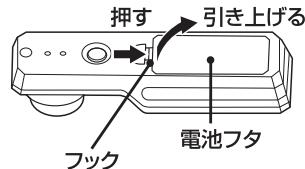

電池フタのフックを押しながら、電池フタを引き上げます。

2. 電池を入れます。

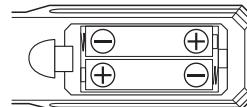


単4形アルカリ乾電池(LR03)を本体の表示に合わせ正しく入れます。


△注意

- 電池の入れかたを間違えると動きません。
- 2本とも同じ種類の新しいアルカリ乾電池を入れてください。

3. 電池フタを取付けます。

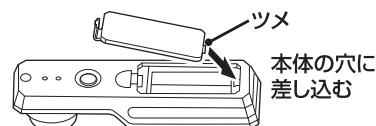

電池フタ下部のツメを本体に差し込み、「カチッ」と音がするまでフック部を押し込んでください。

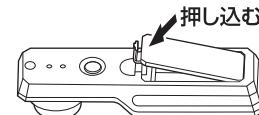

初めてご使用になるとき

〈イオンクレンジングで使用する化粧水について〉

イオンクレンジングモード用の化粧水は付属していません。

市販の「化粧水」または「ふき取り化粧水」をお買い求めください。

！初めてご使用になる化粧水は皮膚試験（パッチテスト）を行い、皮膚に合うかご確認ください。

！肌は皮脂などの油膜に覆われているため、水となじみにくくはじいてしまうことがあります。一般的な化粧水には肌になじみやすい成分が入っているためより効果的に汚れを落とすことができます。鉱泉（ミネラル水）や水だけの化粧水では効果が出にくいことがあります。乳液やジェル状のものは、汚れがコットンに移行しにくく効果が期待できません。

〈超音波で使用するジェルについて〉

超音波モード用のジェルを付属していません。

市販の超音波美顔器用ジェルをお買い求めください。


！初めてご使用になるジェルは皮膚試験（パッチテスト）を行い、皮膚に合うかご確認ください。

！ジェルはヘッドと肌の密着を良くして超音波を伝えるために使用します。ジェルを使用しないと密着が悪くなり超音波が伝わりません。

伸びが良く垂れにくくて乾きにくいジェルをご使用ください。

皮膚試験（パッチテスト）の手順

皮膚試験（パッチテスト）は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

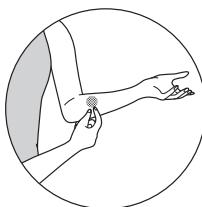

△注意

- 皮膚試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしないでください。
- 塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、洗い流してください。
- 皮脂試験の結果、異常があった場合は、使用をやめてください。
専門の医師にご相談ください。

ご使用前に

△警告

使用中、肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、専門医に相談してください。

事故や体調不良を起こす原因になります。

△注意

肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しないでください。

肌のトラブル、体調不良の原因になります。

イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは、はずしてください。

肌のトラブル、体調不良の原因になります。

●モードについて

STEP1 イオンクレンジング（1日1回・約5分）

通常の洗顔では落としきれない微細な汚れを落とします。

STEP2 超音波（週2~3回・約5分）

1秒間に約100万回の超音波が肌を刺激して、古くなった角質を取り除いてキメを整えます。

●イオンクレンジング前の準備

身につけているアクセサリー類、貴金属類をはずします。



洗顔をして、肌を清潔にしてください。

メイクはクレンジング剤で落としてください。


△注意

メイクを落とした素肌をご使用ください。




イオンクレンジング(1日1回・約5分)

1.コットンをヘッドにセットします。

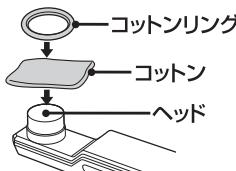

市販のコットンをコットンリングでしっかりと固定します。

2.コットンに化粧水を含ませます。

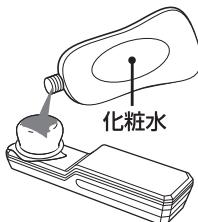

市販の「化粧水」または「ふきとり化粧水」をご使用ください。

お願い

- 乳液やジェル状のものは使用しないでください。
- 一部の化粧水(鉱泉や水だけのもの)では効果が現れにくい場合があります。
- コットンから垂れないようにヘッドがうすく透けて見える程度に含ませてください。


3.イオンクレンジングモードにします。



電源／切替スイッチを押して切り替えます。表示ランプの「イオンクレンジング」が点灯していることを確認してください。

4.イオンクレンジングをはじめます。

- ①本体のアースに手が触れる
ように握ります。

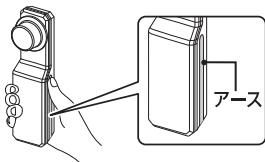

お知らせ

使用中は本体のアースに手が触れていないとイオンクレンジングができません。

- ②ヘッドを肌に軽く押し当て、顔の中心から外側へゆっくりと動かします。



〈イオンクレンジングの目安時間〉
1日1回5分以内です。

お願い

- 週2~3回、5分を超える連続使用はおやめください。肌のトラブルの原因になります。
- ヘッドは肌の同一部に留めず、移動させてご使用ください。肌のトラブル、体調不良などの原因になります。
- コットンの水分がなくなったり、すべりづらい場合は、化粧水を追加してください。

5.使用後


- ①電源／切替スイッチを
押して、電源を切ります。



お知らせ

約5分経過後に自動で電源が「切」になります。

- ②コットンリングをはずし、
コットンをはずします。

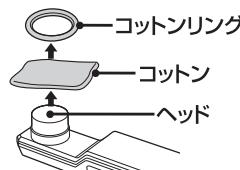

コットンをはずし、ヘッド・コットンリング・本体についた化粧水を、やわらかい布やティッシュなどでふき取ってください。

お願い

- 連続使用はしないでください。肌に負担がかかり、肌トラブルの原因になります。
- 一度使用したコットンは再使用しないでください。肌トラブルの原因になります。

! イオンクレンジング終了後は、化粧水・乳液などで肌を整えるなど、普段通りお手入れをしてください。

超音波(週2~3回・約5分)

- 超音波モードのときは、コットンリングは使用しません。
- 市販の超音波美顔用ジェルをご使用ください。

1. クレンジングと洗顔をします。

2. ジェルを顔のポイントにつけます。



ジェル(500円玉大)を手にとって顔の4ヶ所に置いて軽く伸ばしてください。

ジェルの量が減ってきたときは、ジェルを追加してください。

△注意

- 必ずジェルをお使いください。ジェルがないと超音波は伝わりません。
- 肌の状態・体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりする場合があります。そのときは使用をやめて数日間様子を見て、症状が消えてから使用してください。
- 発疹・発赤・かゆみ・刺激が現れたときは使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 使用前に皮膚試験(パッチテスト)を行なって、肌に影響がないかを確認してください。(7ページをご覧ください。)

3. 超音波モードを選択します。



電源／切替スイッチを押して切り替えます。
表示ランプの「超音波」が点灯していることを確認してください。

4. 肌のお手入れをはじめます。


- ヘッドを肌に軽く押し当て、ゆっくりと動かします。
- ①超音波のモードは、週2~3回、5分以内です。

お願い

- 週2~3回、5分を超える連続使用はおやめください。肌のトラブルの原因になります。
- ヘッドは肌の同一部にとどめず、移動させてご使用ください。肌のトラブル、体調不良などの原因になります。
- ヘッドがすべりにくい場合は、ジェルを追加してください。

- ②ジェルを伸ばしながら肌にヘッド面を密着させ、軽く押さえながらすべらせます。

△警告

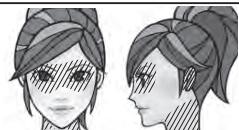

額・眼球・まぶた・耳・首に使用しないでください。

肌・身体のトラブルの恐れがあります。
\\\\\\\\の部分には使用しない。

△注意

- ジェルがない状態で使わないでください。
- 本体使用時にヘッド面を1ヶ所でとどめないでください。

お知らせ

- 約5分経過後に自動で電源が「切」になります。
- 使用中は本体が温かくなります。異常ではありません。

5. 使用後

電源／切替スイッチを
押して、電源を切ります。



ヘッド・本体についたジェルを、やわらかい布やティッシュなどでふき取ってください。

お願ひ

- 連続使用はしないでください。肌に負担がかかり、肌トラブルの原因になります。
- 肌に残ったジェルは、水またはぬるま湯で洗い流してください。

- 使用後はお手入れしてください。
(→15ページ)


基本の使いかた・手順

- ①1~6までを1セットとして左右交互に行ないます。
- ②イラストのラインにそって下から上へすべらせます。
上まで行ったら、いったん肌からはずして再び下から上へくり返してください。
- ③使用時間の目安として、片側で約2分間です。

△注意


ほお骨や小鼻のところはヘッド面が浮きやすくなりますので、
肌にヘッド面を密着させてください。

1.アゴの下からフェイスラインにそって耳下までヘッド面をすべらせます。

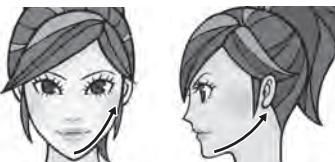


目安として下から上へ5秒
かけて移動させます。
これを約4回行ないます。

2.アゴから耳の手前までヘッド面をすべらせます。

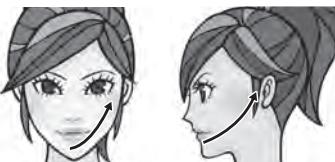


目安として下から上へ5秒
かけて移動させます。
これを約4回行ないます。

3.口元からこめかみまでヘッド面をすべらせます。

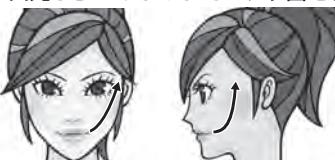


目安として下から上へ5秒
かけて移動させます。
これを約4回行ないます。

4.鼻下からこめかみにヘッド面をすべらせます。

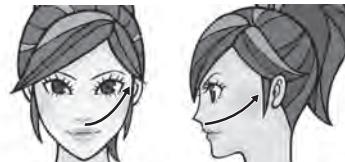

目安として下から上へ5秒
かけて移動させます。
これを約4回行ないます。

5.口元から小鼻の横にヘッド面をすべらせます。

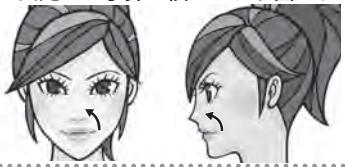

目安として下から上へ5秒
かけて移動させます。
これを約4回行ないます。

6.鼻横からほお骨にヘッド面をすべらせます。



目安として下から上へ5秒
かけて移動させます。
これを約4回行ないます。

△警告



下記の部位には使用しないでください。

- (1) 整形手術をした部位
- (2) 額・眼窩・まぶた・耳・首
- (3) 指定部位以外
- (4) 傷口
- (5) 顔面黒皮症
- (6) 口の中など粘膜の部位
- (7) ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- (8) 感覚、知覚障害を起こしている部位
- (9) 顔に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
- (10) カユミやホテリ、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- (11) 化粧品等で皮膚炎を起こしている部位

事故や肌・身体のトラブルの恐れがあります。

お手入れと保管のしかた

電源が切れていることを確認してください。

△注意

本体は水洗いはしないでください。
また水につけたり、水をかけたりしないでください。
故障の原因になります。



シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類は、変質・
変色の恐れがありますので使用しないでください。

本体



本体の汚れは、やわらかい布やティッシュなどで
ふき取ります。

ヘッド・コットンリング

こびりついた化粧水やジェルは、水分を含ませて固くしぶった布でふき取り
ます。

〈保管について〉

幼児や子供の手の届かないところ、湿気やほこりの少ないところに保管します。

△注意

直射日光の当たるところや自動車内、熱器具の近くに放置しないでください。
変形・変色・故障の原因になります。

浴室など水のかかるところや湿気の多いところで使用したり、放置
しないでください。

故障やショートの原因になります。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

| こんなときは | 調べるところ | 処置 |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| 表示ランプが点灯しない。 | 電池が正しく装着されていない。 電池残量が少なくありませんか？ | 電池を入れ直してください。 新しい電池と交換してください。 |
| 使用中に表示ランプが消灯する。 | スイッチの切り忘れ防止のため、約5分経過すると、自動で運転を停止します。異常ではありません。 | 電池残量が少なくありませんか？ 新しい電池と交換してください。 |
| 表示ランプが点滅する。 | 電池残量が少なくありませんか？ | 新しい電池と交換してください。 |
| ヘッドが振動しない。 | 本機に振動機能はついていません。故障ではありません。 | |
| イオンクレンジングモードのとき、汚れ落ちがわかりにくい。 | 本体のアースに手が触れていますか？ | アースに手が触れるように握ってください。 |
| 化粧水を含ませていますか？ | 化粧水を含ませていますか？ | ヘッドがうすく透けて見える程度まで化粧水を含ませてください。 |

■Q&A

Q1. 顔以外(体など)にも使っても良いですか？

A. 顔専用です。顔以外には使用しないでください。

Q2. 1日に何度使っても大丈夫ですか？

A. 以下の使用頻度・使用時間を守ってください。
・イオンクレンジング:1日1回(約5分) ・超音波:週2~3回(約5分)

Q3. 肌にピリピリ感を感じるのですが…

A. •「イオンクレンジング」モード時には、コットンに化粧水をつぎ足してください。
•「超音波」モード時には、ジェルをつぎ足してください。
それでも肌に違和感を感じる場合は、直ちにご使用を中止し、専門医にご相談ください。そのままご使用を続けますと、事故や体調不良、肌トラブルの原因になります。

●「イオンクレンジング」モード

Q4. 「イオンクレンジング」モードは、メイク落としに使うものですか？

A. •「イオンクレンジング」モードでメイクを落とすことはできません。
洗顔して、メイク、皮脂、汚れなどを落とし、肌を清潔な状態にした後、ご使用ください。

Q5. コットンが取付けできません。

A. •コットンのサイズが小さすぎたり、大きすぎたりしていませんか？
別のコットンを使用してください。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電池を抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

| | |
|--------------|--------------------------|
| 使 用 電 源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)2本(電池別売) |
| オートオフタイマー(約) | 5分 |
| 製 品 寸 法(約) | 幅36×奥行32×高さ130mm |
| 付 属 品 | コットンリング×1個(本体装着済) |

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。

海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用の超音波／イオン美顔器の点検を！

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電池から液漏れしている。
- いつもより電池が熱くなっている。
- 電池の端子部にさびが発生している。

ご使
用
中
止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電池をはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。